

INSTRUKCJA UŻYCIACALCIPLUS Materiał do wypełniania kanałów korzeniowych

Opis

CALCIPLUS to oparty na wodorotlenku wapnia, kremowy, wysoce nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, gotowy do użycia materiał do wypełniania kanałów korzeniowych w formie strzykawki.

Skład

Wodorotlenek wapnia, siarczan baru, glikol polietylenowy i środki uzupełniające

Wskazania

- Nadaje się do stosowania we wszystkich rodzajach leczenia kanałowego
- Tymczasowy opatrunek dezynfekujący stosowany podczas leczenia kanałowego endodontycznego
- Pośrednie pokrycie miazgi lub leczenie głębokich zmian próchnicowych
- Bezpośrednie pokrycie miazgi
- Pośrednie pokrycie miazgi jako pasta pokrywająca
- Łagodzi ból jako tymczasowy materiał wypełniający

Przeciwwskazania

- Bezpośrednie pokrycie miazgi po odsłonięciu miazgi w zębnie objętej próchnicą, jeśli obszar odsłonięcia jest większy niż 1 mm²
- Nie można ustanowić całkowicie suchego pola
- Leczenie zęba nie może zostać zakończone podczas jednej wizyty
- Leczony ząb już powoduje dyskomfort.
- Bezpośrednie i pośrednie pokrycie miazgi, jeśli uszkodzenie miazgi jest nieodwracalne.
- Preparatu CALCIPLUS nie należy stosować u pacjentów ze stwierdzoną alergią na którykolwiek z jego składników.

Aplikacja

Bezpośrednie i pośrednie pokrycie miazgi zgodnie z zastosowaniem

Za pomocą dołączonych końcówek aplikacyjnych nabrać niewielką ilość produktu na podkładkę do mieszania. Następnie preparat CALCIPLUS nakładać na odsłoniętą miazgę lub zębnię w pobliżu miazgi cienkimi warstwami i małymi fragmentami za pomocą odpowiedniego instrumentu. Następnie powierzchnia jest uszczelniana warstwą materiału podkładowego ubytku.

Tymczasowy opatrunek dezynfekujący zgodnie z zastosowaniem

Preparat Calciplus jest wprowadzany bezpośrednio do przygotowanego i osuszonego kanału korzeniowego za pomocą dołączonej końcówki aplikacyjnej, a następnie przenoszony w górę kanału do obszaru wierzchołka. W razie potrzeby aplikację można powtórzyć.

Szczelne zamknięcie ubytku endodontycznego przy użyciu tymczasowego materiału wypełniającego jest niezbędne w celu uniknięcia zanieczyszczenia układu kanałów korzeniowych, które może wystąpić między wizytami.

Usuwanie Calciplus odbywa się za pomocą odpowiedniego roztworu irygacyjnego i instrumentów. Pastę Calciplus należy usunąć przed trwałym wypełnieniem.

Uwaga: Ważne jest przestrzeganie przeciwwskazań.

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Nie używana strzykawka powinna być zawsze zamknięta

Działania niepożądane

Nie są znane działania niepożądane

Interakcje

CALCIPLUS może zmniejszać szkodliwy wpływ cementów mieszanych z kwasami na kompleks miazgowo-zębinowy.

Okres ważności: 2 lata od daty produkcji

Utylizacja: Utylizacja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przekazać na zatwierdzone składowisko odpadów lub do spalarni odpadów na warunkach zatwierdzonych przez władze lokalne.

Opakowania nieooczyszczzone: Utylizacja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami

Środki ostrożności

Materiały przechowywać poza zasięgiem dzieci!


Wyłącznie do użytku w stomatologii!

Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

Wodorotlenek wapnia ma właściwości drażniące; kontakt wodorotlenku wapnia ze skórą, oczami i błoną śluzową może powodować miejscowe podrażnienie. W razie przypadkowego kontaktu należy spłukać dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Materiał ten został opracowany wyłącznie do użytku w stomatologii. Przetwarzanie powinno odbywać się ściśle według instrukcji użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania instrukcji lub określonego obszaru zastosowania. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przetestowanie materiału pod kątem jego przydatności i wykorzystania do celów, które nie zostały wyraźnie określone w instrukcji. Opisy i dane nie stanowią gwarancji atrybutów. Nie używać po upływie daty ważności Szczelnie zamknąć po użyciu Kończówki aplikatora są jednorazowego użytku

Data opracowania informacji o sposobie użycia: Akt. 01.03.07.2020 TD-03-IFU-40 Nr ref: 2103

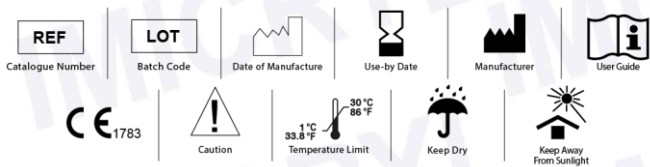

INSTRUKCJA UŻYCIA CALCIPLUS

Materiał do wypełniania kanałów korzeniowych

Opis

CALCIPLUS to oparty na wodorotlenku wapnia, kremowy, wysoce nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, gotowy do użycia materiał do wypełniania kanałów korzeniowych w formie strzykawki.

Skład

Wodorotlenek wapnia, siarczan baru, glikol polietylenowy i środki uzupełniające

Wskazania

- Nadaje się do stosowania we wszystkich rodzajach leczenia kanałowego
- Tymczasowy opatrunek dezynfekujący stosowany podczas leczenia kanałowego endodontycznego
- Pośrednie pokrycie miazgi lub leczenie głębokich zmian próchnicowych
- Bezpośrednie pokrycie miazgi
- Pośrednie pokrycie miazgi jako pasta pokrywająca
- Łagodzi ból jako tymczasowy materiał wypełniający

Przeciwwskazania

- Bezpośrednie pokrycie miazgi po odsłonięciu miazgi w zębnie objętej próchnicą, jeśli obszar odsłonięcia jest większy niż 1 mm²
- Nie można ustanowić całkowicie suchego pola
- Leczenie zęba nie może zostać zakończone podczas jednej wizyty, a ząb już powoduje dyskomfort.
- Bezpośrednie i pośrednie pokrycie miazgi, jeśli uszkodzenie miazgi jest nieodwracalne.
- Preparatu CALCIPLUS nie należy stosować u pacjentów ze stwierdzoną alergią na którykolwiek z jego składników.

Aplikacja

Bezpośrednie i pośrednie pokrycie miazgi zgodnie z zastosowaniem

Za pomocą dołączonych końcówek aplikacyjnych nabrać niewielką ilość produktu na podkładkę do mieszania. Następnie preparat CALCIPLUS nakładać na odsłoniętą miazgę lub zębnię w pobliżu miazgi cienkimi warstwami i małymi fragmentami za pomocą odpowiedniego instrumentu. Następnie powierzchnia jest uszczelniana warstwą materiału podkładowego ubytku.

Tymczasowy opatrunek dezynfekujący zgodnie z zastosowaniem

Preparat Calciplus jest wprowadzany bezpośrednio do przygotowanego i osuszonego kanału korzeniowego za pomocą dołączonej końcówki aplikacyjnej, a następnie przenoszony w górę kanału do obszaru wierzchołka. W razie potrzeby aplikację można powtórzyć.

Szczelne zamknięcie ubytku endodontycznego przy użyciu tymczasowego materiału wypełniającego jest niezbędne w celu uniknięcia zanieczyszczenia układu kanałów korzeniowych, które może wystąpić między wizytami.

Usuwanie Calciplus odbywa się za pomocą odpowiedniego roztworu irygacyjnego i instrumentów. Pastę Calciplus należy usunąć przed trwałym wypełnieniem.

Uwaga: Ważne jest przestrzeganie przeciwwskazań.

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Nie używana strzykawka powinna być zawsze zamknięta

Działania niepożądane

Nie są znane działania niepożądane

Interakcje

CALCIPLUS może zmniejszać szkodliwy wpływ cementów mieszanych z kwasami na kompleks miazgowo-zębinowy.

Okres ważności: 2 lata od daty produkcji

Utylizacja: Utylizacja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przekazać na zatwierdzone składowisko odpadów lub do spalarni odpadów na warunkach zatwierdzonych przez władze lokalne.

Opakowania nieooczyszczzone: Utylizacja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami

Środki ostrożności

Materiały przechowywać poza zasięgiem dzieci!

Wyłącznie do użytku w stomatologii!

Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

Wodorotlenek wapnia ma właściwości drażniące; kontakt wodorotlenku wapnia ze skórą, oczami i błoną śluzową może powodować miejscowe podrażnienie. W razie przypadkowego kontaktu należy spłukać dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Materiał ten został opracowany wyłącznie do użytku w stomatologii. Przetwarzanie powinno odbywać się ściśle według instrukcji użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania instrukcji lub określonego obszaru zastosowania. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przetestowanie materiału pod kątem jego przydatności i wykorzystania do celów, które nie zostały wyraźnie określone w instrukcji. Opisy i dane nie stanowią gwarancji atrybutów. Nie używać po upływie daty ważności Szczelnie zamknąć po użyciu Kończówki aplikatora są jednorazowego użytku

Data opracowania informacji o sposobie użycia: Akt. 01.03.07.2020 TD-03-IFU-40 Nr ref: 2103

