



Opis

Nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich cement do mocowania z jononorem szklanym
Do stosowania wyłącznie przez lekarza stomatologa w zalecanych wskazaniach.

Skład

- Proszek:** Fluorokrzemian wapniowo-glinowy, tlenek baru, tlenek cynku.
■ Płyn: Kwas poliakrylowy, kopolimer kwasu akrylowego i kwasu tianonowego, roztwór wodny, kwas winowy, Paraben, woda dejonizowana.

Zalety

- Dobry czas pracy, dobre właściwości mieszania
- Niewielki rozmiar cząstek
- Wysoka nieprzepuszczalność dla promieni rentgenowskich
- Wysokie i długotrwałe uwalnianie fluoru
- Dobra biokompatybilność, niska rozpyliwość (maks. 0,1%)
- Silne wiązanie z zębina
- Optymalne zwilżanie proszku i płynu
- Wybór kolorów uniwersalnych i białych
- Unikać wilgoci, zawiera żel krzemionkowy
- Niewielka grubość powłoki, 14µm - 16µm

Zalecane wskazania

- 1) Cementowanie metalowych wkładów, nakładów, koron, mostów i wkładów.
- 2) Cementowanie wysokowytrzymałych (na bazie tlenku cyrkonu) koron i mostów pełnoceramicznych.
- 3) Opaski i paski ortodontyczne.


Przeciwwskazania

- 1) Pokrycie miazgi
- 2) W rzadkich przypadkach produkt może powodować nadwrażliwość u niektórych osób. W przypadku wystąpienia takich reakcji przerwać stosowanie produktu i skontaktować się z lekarzem.

Aplikacja

1) Dozowanie proszku i płynu

- a. Dla dokładnego dozowania proszku należy lekko postukać w butelkę. Nie potrząsać i nie odwracać butelki dnem do góry. Wsypać proszek na łyżeczkę. Gdy łyżeczka jest pełna, zeszkrobać nadmiar z łyżeczki za pomocą korka do proszku, a następnie mocno dokręcić zakrętkę.
b. Lekko potrząsnąć butelką z płynem w górę i w dół, a następnie przytrzymać butelkę z płynem odwróconą dnem do góry. Poczekać, aż płyn wypełni komorę z zakraplaczem. Podać płyn bez pęcherzyków powietrza na podkładkę do mieszania i szybko zamknąć zakrętkę butelki z płynem.

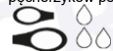

1 miarka proszku 2 krople płynu przy użyciu małej łyżeczki
1 miarka proszku 4 krople płynu przy użyciu dużej łyżeczki

2) Mieszanie

Podczas mieszania stopniowo i szybko dodawać proszek do mieszaniny za pomocą szpatułki.

Czas mieszania 20" - 25" (23±2 °C - 73,4±4 °F)
Czas pracy 2' - 3' (23±2 °C - 73,4±4 °F)
(od rozpoczęcia mieszania)

Czas wiązania 4' - 4' 30" (': minuta ": sekunda)
(Po umieszczeniu uzupełnienia)

3) Przygotowanie zębów

- a. Przygotować ząb przy użyciu standardowych technik. Do pokrywania miazgi użyć wodorotlenku wapnia lub innego uszczelnacza.
b. Oczyszczyć przygotowane zęby pumeksem i wodą.
c. Dokładnie spłukać wodą. Usunąć nadmiar wilgoci za pomocą bawełnianego wacika lub delikatnie przedmuchiwać strzykawką z powietrzem niezawierającym oleju. Nie suszyć. Najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy przygotowane powierzchnie wydają się być bardzo lekko wilgotne.

4) Cementowanie

- a. Pokryć wewnętrzną powierzchnię uzupełnienia odpowiednią ilością cementu i natychmiast osadzić. Wyższe temperatury skracają czas pracy.
b. Utrzymywać umiarkowany docisk.
c. Rozpocząć usuwanie nadmiaru cementu, gdy będzie on gumowaty.
d. Wykańczanie można rozpocząć 5 minut 30 sekund po osadzeniu uzupełnienia.

Przechowywanie

Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu. Temperatura przechowywania: 1-30 °C / 33,8-86 °F
Okres ważności: 3 lata od daty produkcji

Działania niepożądane

W rzadkich przypadkach składniki Nova Glass L mogą powodować uczulenie. W takich przypadkach należy zaprzestać stosowania produktu.

Interakcje

Materiały zawierające eugenol mogą hamować polimerizację Nova Glass L.

Utylizacja: Utylizacja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przekazać na zatwierdzone składowisko odpadów lub do spalarni odpadów na warunkach zatwierdzonych przez władze lokalne.

Opakowania nieoczyszczone: Utylizacja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami

Środki ostrożności

Kontakt nieutwardzonego preparatu Nova Glass L z błoną śluzową, skórą lub oczami może powodować podrażnienia i należy go unikać. W przypadku kontaktu z tkanką jamy ustnej lub skórą, natychmiast usunąć za pomocą gąbki lub wacika nasączonego alkoholem. Myć dużą ilością wody. Aby uniknąć kontaktu, można użyć koferdamu i/lub masła kakaowego w celu odizolowania pola operacyjnego od skóry lub tkanek jamy ustnej. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je wodą. Dostępne na rynku rękawice medyczne nie zapewniają ochrony przed uczulającym działaniem metakrylanów. Nie mieszać proszku lub płynu ze składnikami innych cementów.

Platformy aplikatorów są jednorazowego użytku

Data opracowania informacji o sposobie użycia: Akt. 01.03.07.2020 TD-03-IFU-09 Nr ref: 2003&2004

For Crown Cementation Figures



Opis

Nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich cement do mocowania z jononorem szklanym
Do stosowania wyłącznie przez lekarza stomatologa w zalecanych wskazaniach.

Skład

- Proszek:** Fluorokrzemian wapniowo-glinowy, tlenek baru, tlenek cynku.
■ Płyn: Kwas poliakrylowy, kopolimer kwasu akrylowego i kwasu tianonowego, roztwór wodny, kwas winowy, Paraben, woda dejonizowana.

Zalety

- Dobry czas pracy, dobre właściwości mieszania
- Niewielki rozmiar cząstek
- Wysoka nieprzepuszczalność dla promieni rentgenowskich
- Wysokie i długotrwałe uwalnianie fluoru
- Dobra biokompatybilność, niska rozpyliwość (maks. 0,1%)
- Silne wiązanie z zębina
- Optymalne zwilżanie proszku i płynu
- Wybór kolorów uniwersalnych i białych
- Unikać wilgoci, zawiera żel krzemionkowy
- Niewielka grubość powłoki, 14µm - 16µm

Zalecane wskazania

- 1) Cementowanie metalowych wkładów, nakładów, koron, mostów i wkładów.
- 2) Cementowanie wysokowytrzymałych (na bazie tlenku cyrkonu) koron i mostów pełnoceramicznych.
- 3) Opaski i paski ortodontyczne.


Przeciwwskazania

- 1) Pokrycie miazgi
- 2) W rzadkich przypadkach produkt może powodować nadwrażliwość u niektórych osób. W przypadku wystąpienia takich reakcji przerwać stosowanie produktu i skontaktować się z lekarzem.

Aplikacja

1) Dozowanie proszku i płynu

- a. Dla dokładnego dozowania proszku należy lekko postukać w butelkę. Nie potrząsać i nie odwracać butelki dnem do góry. Wsypać proszek na łyżeczkę. Gdy łyżeczka jest pełna, zeszkrobać nadmiar z łyżeczki za pomocą korka do proszku, a następnie mocno dokręcić zakrętkę.
b. Lekko potrząsnąć butelką z płynem w górę i w dół, a następnie przytrzymać butelkę z płynem odwróconą dnem do góry. Poczekać, aż płyn wypełni komorę z zakraplaczem. Podać płyn bez pęcherzyków powietrza na podkładkę do mieszania i szybko zamknąć zakrętkę butelki z płynem.

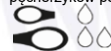

1 miarka proszku 2 krople płynu przy użyciu małej łyżeczki
1 miarka proszku 4 krople płynu przy użyciu dużej łyżeczki

2) Mieszanie

Podczas mieszania stopniowo i szybko dodawać proszek do mieszaniny za pomocą szpatułki.

Czas mieszania 20" - 25" (23±2 °C - 73,4±4 °F)
Czas pracy 2' - 3' (23±2 °C - 73,4±4 °F)
(od rozpoczęcia mieszania)

Czas wiązania 4' - 4' 30" (': minuta ": sekunda)
(Po umieszczeniu uzupełnienia)

3) Przygotowanie zębów

- a. Przygotować ząb przy użyciu standardowych technik. Do pokrywania miazgi użyć wodorotlenku wapnia lub innego uszczelnacza.
b. Oczyszczyć przygotowane zęby pumeksem i wodą.
c. Dokładnie spłukać wodą. Usunąć nadmiar wilgoci za pomocą bawełnianego wacika lub delikatnie przedmuchiwać strzykawką z powietrzem niezawierającym oleju. Nie suszyć. Najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy przygotowane powierzchnie wydają się być bardzo lekko wilgotne.

4) Cementowanie

- a. Pokryć wewnętrzną powierzchnię uzupełnienia odpowiednią ilością cementu i natychmiast osadzić. Wyższe temperatury skracają czas pracy.
b. Utrzymywać umiarkowany docisk.
c. Rozpocząć usuwanie nadmiaru cementu, gdy będzie on gumowaty.
d. Wykańczanie można rozpocząć 5 minut 30 sekund po osadzeniu uzupełnienia.

Przechowywanie

Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu. Temperatura przechowywania: 1-30 °C / 33,8-86 °F
Okres ważności: 3 lata od daty produkcji

Działania niepożądane

W rzadkich przypadkach składniki Nova Glass L mogą powodować uczulenie. W takich przypadkach należy zaprzestać stosowania produktu.

Interakcje

Materiały zawierające eugenol mogą hamować polimerizację Nova Glass L.

Utylizacja: Utylizacja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przekazać na zatwierdzone składowisko odpadów lub do spalarni odpadów na warunkach zatwierdzonych przez władze lokalne.

Opakowania nieoczyszczone: Utylizacja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami

Środki ostrożności

Kontakt nieutwardzonego preparatu Nova Glass L z błoną śluzową, skórą lub oczami może powodować podrażnienia i należy go unikać. W przypadku kontaktu z tkanką jamy ustnej lub skórą, natychmiast usunąć za pomocą gąbki lub wacika nasączonego alkoholem. Myć dużą ilością wody. Aby uniknąć kontaktu, można użyć koferdamu i/lub masła kakaowego w celu odizolowania pola operacyjnego od skóry lub tkanek jamy ustnej. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je wodą. Dostępne na rynku rękawice medyczne nie zapewniają ochrony przed uczulającym działaniem metakrylanów. Nie mieszać proszku lub płynu ze składnikami innych cementów.

Platformy aplikatorów są jednorazowego użytku

Data opracowania informacji o sposobie użycia: Akt. 01.03.07.2020 TD-03-IFU-09 Nr ref: 2003&2004

For Crown Cementation Figures

